


Mirante SLO/OCT uchun OKT-angiografiya opsiyasi

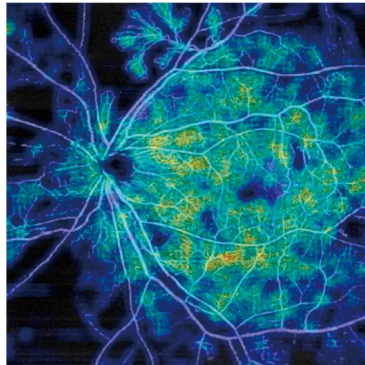

- To'liq qamrovli OKT-angiografiya tasviri va diagnostikasi
- Aniq tasvirga olish uchun Tracing HD plus funksiyasi
- Tanlanadigan aniqlik va fine rejimi
- Keng maydonli skanerlash
- Qon tomir zichligi va perfuziya zichligi xaritasi
- FAZ ni avtomatik aniqlash va shakl tahlili

Texnik xususiyatlari

Macula AngioScan: makula xaritasi qatlamlari	7 ta qatlam: shishasimon tana, yuza, chuqur, tashqi to'r parda, ORCC, xoriokapillyar, xorioid
Optic Nerve Head AngioScan: disk xaritasi qatlamlari	4 ta qatlam: shishasimon tana, ko'ruv nervi boshi, radial peripapillyar kapillyar to'r (RPCP), lamina cribrosa
Tracing HD plus funksiyasi	Skanerlash joyini SLO tasvirida bir xil saqlash uchun ko'z harakatini kuzatadi; yuqori aniqlik / yuqori kontrast sozlamasi yoki kuzatuvsiz bir necha soniyada suratga olish (Mirante SLO/OCT)
Aniqlik rejimi	Har bir chiziqqa 2, 4 yoki 8 skan (2 HD, 4 HD, 8 HD); yuqori ruxsatli tasvirlar uchun fine rejimi (Mirante SLO/OCT)
Keng maydonli skanerlash	12 x 12 mm gacha (Mirante SLO/OCT)
Miqdoriy tahlil	Har bir qatlam uchun qon tomir zichligi xaritasi va perfuziya zichligi xaritasi
FAZ tahlili	Fovealyar avaskulyar zonani (FAZ) shakl ko'rsatkichlari bilan avtomatik aniqlash
Dinamik kuzatuv funksiyasi	Qon tomir zichligi yoki perfuziya zichligining vaqt bo'yicha o'zgarishi xronologik tartibda ko'rsatiladi (Mirante SLO/OCT)
Mos qurilma	Mirante SLO/OCT

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app